


Manual de Utilização Nose UP

Para sua segurança e garantia de ótima utilização, certifique-se de que realizou a compra do produto através do site oficial www.NoseUP.com.br.

O seu NoseUP pode vir em 2 cores. Com as almofadas acolchoadas de silicone transparentes ou vermelhas.



Por que funciona?

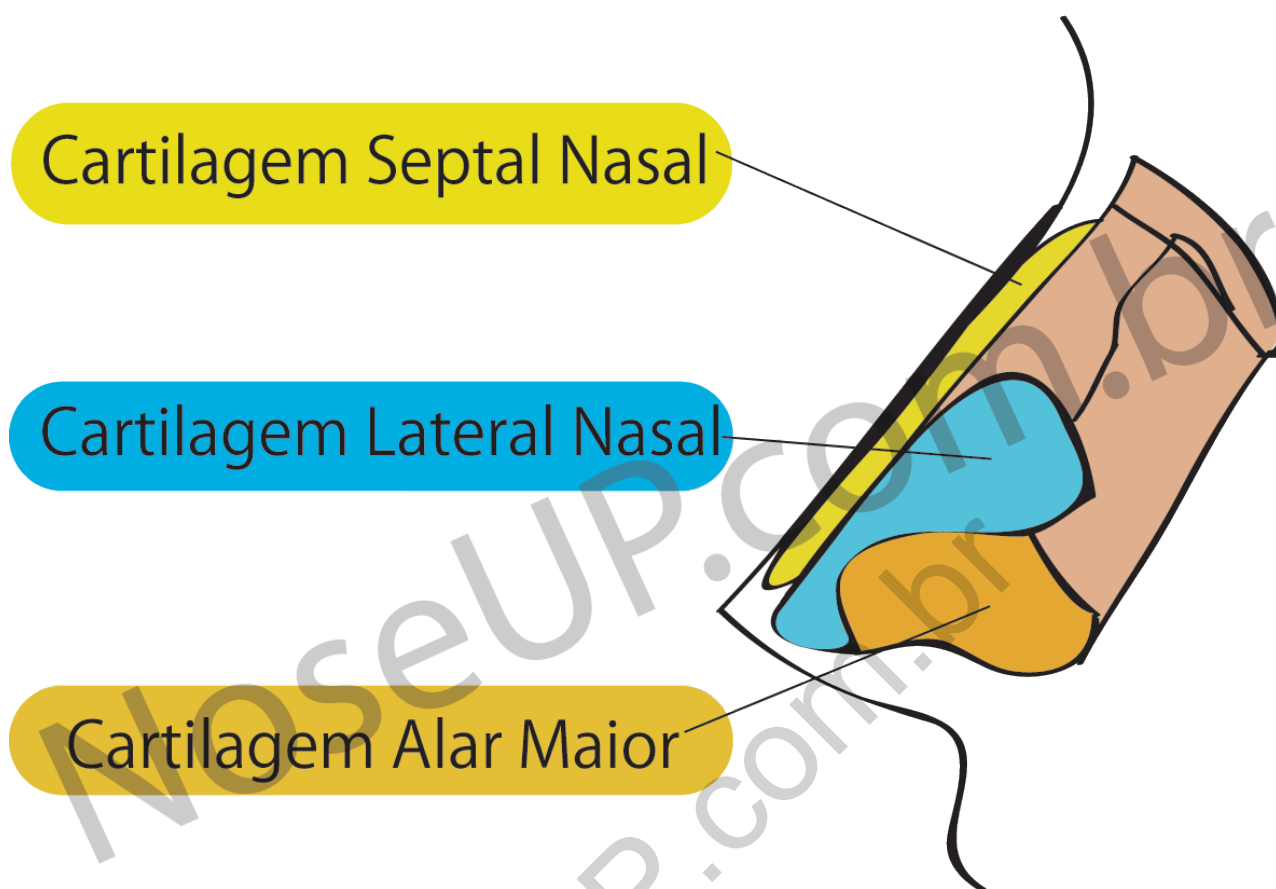

O Nose UP age na cartilagem do Nariz.


Parte da estrutura do nariz é formada de cartilagem, um tecido elástico e moldável.

O Nose UP atua na cartilagem do nariz a moldando, reduzindo a largura e o tamanho do seu nariz, deixando-o arrebitado e elegante.

O aparelho foi criado com Design Inteligente de forma a distribuir a pressão de forma adequada ao formato do nariz, atuando simultaneamente na Cartilagem Septal Nasal, assim como na Cartilagem Lateral Nasal e Cartilagem Alar.

É a melhor alternativa à uma Rinoplastia. Uma cirurgia plástica no nariz pode custar de 4 a 18 mil reais. Na esmagadora maioria dos casos, a pessoa consegue os resultados desejados utilizando o Nose UP sem precisar passar por uma intervenção de cirurgia plástica no nariz.

Instruções de Uso

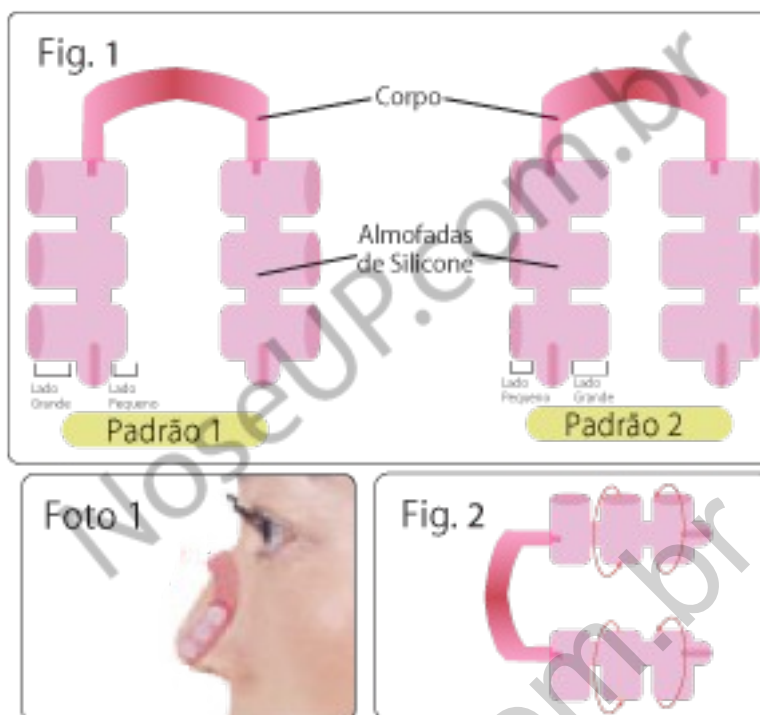

- **1.** Na figura 1 o produto é ilustrado nos seus dois padrões distintos de ajuste.
- **2.** Após confirmar que o produto está como ilustrado na figura (2) Coloque-o no nariz como mostra a Foto (1)

O produto foi desenhado de modo a não cair do nariz.

Portanto, se sentir que está solto, altere o padrão das almofadas para o modo 2, colocando o Lado Grande para dentro, como mostra a figura 2.

Para isto remova as almofadas de silicone e insira-as novamente. Cuidado com a força ao puxá-las para não danificar o aparelho.

- **3.** O uso recomendado para este produto é de 15 minutos diários.
- **4.** Após utilizar o produto, limpe-o com um pano, tendo cuidado para não danificá-lo.

Em seguida, apresentamos as instruções sobre como mudar o padrão de ajuste do seu aparelho Nose UP com fotos ilustradas.

Alterando o Padrão de Ajuste do Nose UP.

O seu NoseUP pode ser ajustado para o tamanho ideal de encaixe no seu nariz. Observe como as almofadas alcochoadas de silicone do aparelho possuem dois tamanhos diferentes.



(Padrão de Ajuste I)

Na foto acima, ilustramos o NoseUP no Padrão de Ajuste onde o lado de Tamanho Pequeno está virado para dentro do aparelho. Este é o tamanho ideal para quem deseja usar o aparelho mas não tem o nariz muito grande.

Lembre-se que o seu NoseUP deve ficar justo no seu nariz. Se o sentir muito folgado, deve utilizar o lado de Tamanho Grande das almofadas alcochoadas para dentro. Como mostra a figura abaixo:



(Padrão de Ajuste II)

Ajuste de Tamanho

Para alterar o padrão de ajuste de forma a deixar o Nose UP da forma ideal para o seu nariz siga os passos abaixo.

Retire a primeira almofada alcochoada do produto de forma sutil para não danificar o aparelho.




Gire a almofada que foi retirada de forma a parte de Tamanho Grande ficar virada para dentro, como mostra a figura abaixo:



Introduza a almofada no aparelho novamente, com cuidado para não danificá-lo.




Quando já estiver introduzida, repita o procedimento com a segunda almofada.

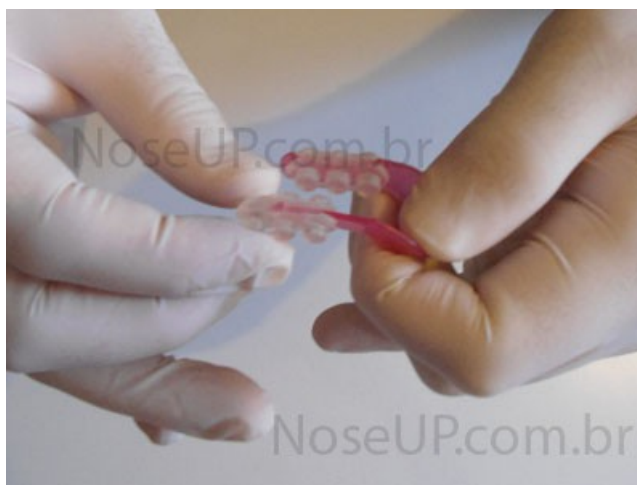



Pronto, o seu Nose UP está ajustado para um tamanho mais confortável ao seu Nariz.

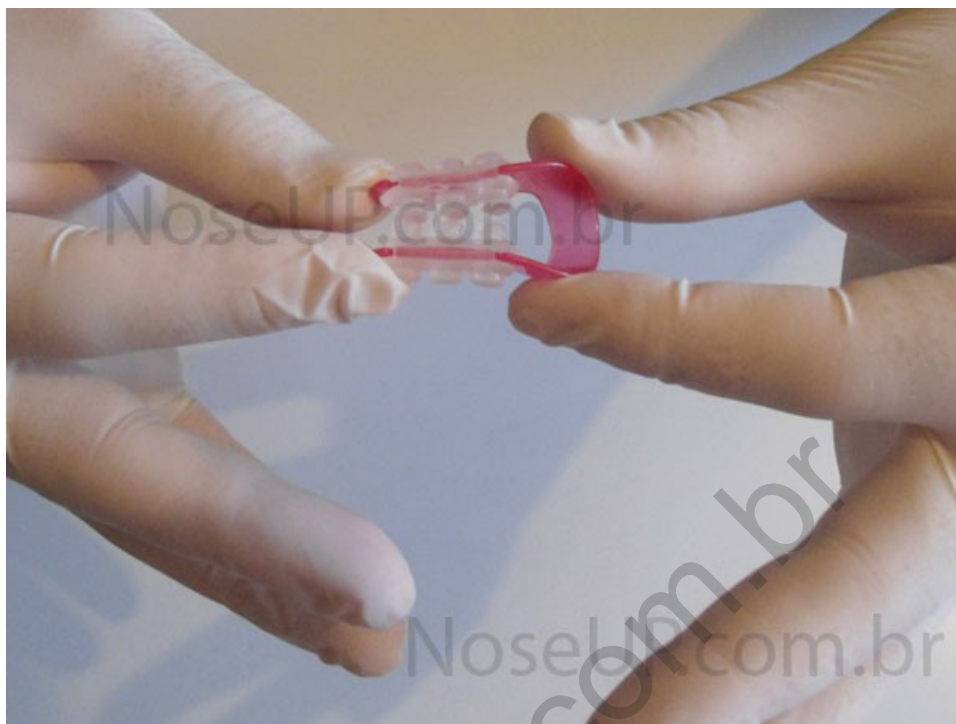

Atenção!

- Utilize o produto apenas para sua finalidade.
- Mantenha-o fora do alcance das crianças.
- No caso de muita dor ao utilizar o produto, pare de usá-lo imediatamente.
- Caso esteja em tratamento hospitalar por Febre dos Fenos, consulte um médico antes de o utilizar.
- Não utilize o produto por um período prolongado de tempo.
- Havendo alguma anormalidade na pele durante o uso, interrompa o uso imediatamente.
- Não utilize o produto durante o sono ou enquanto dirige.
- Se sentir-se mal durante o uso, pare de utilizar imediatamente.
- Caso sua respiração bucal seja difícil, não utilize o produto.
- Caso o produto seja dobrado ou manejado com força, há risco de danificação do aparelho.

Receba nossos agradecimentos e desejos de sucesso,
Equipe Nose UP (www.noseup.com.br)